

# Rätt etikett på rätt sätt

Gäller för: Landstinget i Värmland

## Syfte

En korrekt placerad provtagningsetikett krävs för avläsning i en streckodsläsare vilket i sin tur underlättar för att få svar inom önskad tid. Rätt etikett på rätt rör krävs för ett patientsäkert provresultat.

## Gör så här inför provtagning

- **Kontrollera** att etiketten har rätt datum och tid.
- **Verifiera** patientens identitet mot personuppgifter på etiketten.
- **Läs hjälptexten** på etiketten och ta upp motsvarande rör. (Foto på röret finns i provtagningsanvisningen).
- **Placera** etiketten rakt med streckkoden längs med röret/provkäret, utan veck eller vikta hörn.



## Kom ihåg!

- Rätt patient och rätt etikett på rätt rör.
- Handsprit gör streckkod och text oläslig.
- Provrören har utgångsdatum (ett gammalt rör kan ge för liten provmängd eller felaktigt provresultat).

## Information på etiketten

**Streckkod = remiss-ID\***

*\*är ett unikt nummer på beställningen i Cosmic*

**Patient-ID**

**Beställare (kod)**

**Patientens namn**

**Provtagningsdatum, tid**



**Beställning** (analyskoder)


*(Är även reservrutin/vägledning för "ej skickad" remiss i Cosmic.)*

**Rörtyp** = färg på proppen (ev. storlek)


*Proppfärg återspeglar olika tillsatser i rören. Fel proppfärg kan ge felaktiga provresultat.*

*\*Till blodgruppering och BAS-/MG-test används etikett med enbart namn och personnummer.*

## Varför behövs rätt placering?

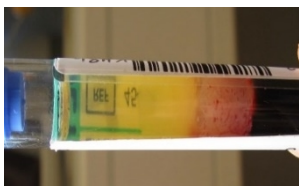

*Placering längs med röret, gör att laboratoriet kan göra en visuell granskning av innehållet som t.ex. rätt mängd, hemolys och grumlighet.*

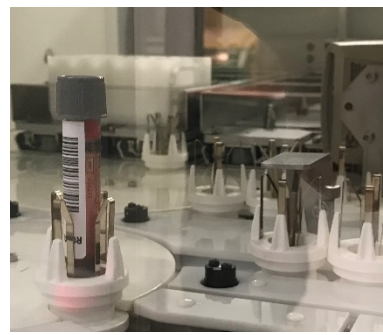

*En skanner läser automatiskt av streckkoden på etiketten. Beställningen från Cosmic skickas över till analysinstrumentet.*