

## Bronk - biopsi

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

### Provtagningsmaterial

Se nedan

### Remiss

Beställs elektroniskt, *PAD*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

### Remissuppgifter

- Ange lokalisation för varje fraktion och numrera.
- Ange antalet biopsier för varje fraktion.

Se *Provtagning – Allmänna anvisningar*

### Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras.

Etikettera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi*

### Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

### Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen. Detta är dock inte alltid möjligt till de största preparaten.

### Markering av preparat

Ingen.

### Förvaring och transport

Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

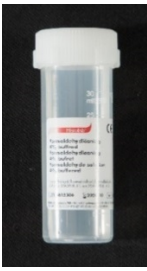
### Förväntad svarstid

2-4 veckor.

### Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

### Provtagningsmaterial

<b>Provkärl</b>			
	Buffrad 4 % formaldehydlösning		
<b>Volym</b>	40 mL		
<b>Art.nr. (Inköpsportalen)</b>	5042223		

### Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson

**Medicinskt ansvarig:** Charlotta Gestblom